




KB 30 S HÄRTEPRÜFMASCHINE von 0,005 kg - 62,5 kg



KB 30 S FA Vickers Vollautomat

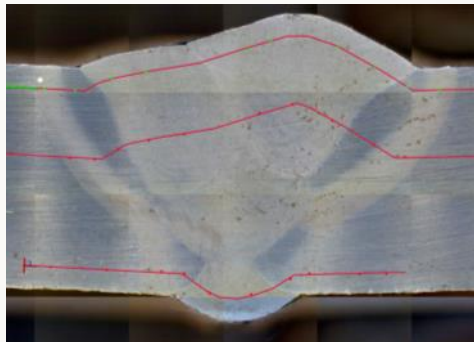


KB 30 S
VIDEO, SA, FA

Mikro
Kleinlast
Härteprüfmaschine

Vickers
Knoop
Brinell

Härteprüfmaschinen im Mikro, Kleinlast und Makro Bereich KB 30 S

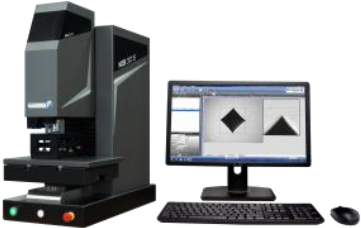VIDEO	SA (Halbautomat)	FA (Vollautomat)
		
Steuerung über PC	Steuerung über PC mit motorischen Kreuztisch	Steuerung über PC mit motorischen Kreuztisch
Software KB Hardwin XL Video	Software KB Hardwin XL Semi	Software KB Hardwin XL FA/ FA basic
5 MP USB Kamera	5 MP USB Kamera	5 MP USB Kamera
Zoom 7x optional	Zoom 7x optional	Zoom 7x optional

**KB Hardwin XL
BASIC**

**KB Hardwin XL
SEMI**

**KB Hardwin XL
FULLY**

Die neue Generation von Härteprüfmaschinen der KB Prüftechnik GmbH besteht durch **außerordentliche Präzision** und **Reproduzierbarkeit**. Durch den Einsatz der Härteprüfsoftware **KB Hardwin XL** tritt der Benutzer in eine neue, komfortable Welt der Härteprüfung ein. Mit den KB-Produkten erhalten Sie souverän Prüfergebnisse nach Brinell, Vickers und Knoop.

Durch **innovative Entwicklungen** wurden **neue Automatisierungsmöglichkeiten** geschaffen, die den Benutzer schnell und sicher an sein Prüfergebnis führen. Die Produktreihe Load Cell Range mit KB Hardwin XL basiert auf aufeinander aufbauenden Ausbaustufen, Video, SA und FA, die wiederum für verschiedene Laststufen, 10 kg, 30 kg und 50 kg, vorgesehen sind.




- Standard automatische 2-fach Schwenkeinrichtung
- Hochgenaue 1/2,5" 5 Megapixel Kamera 2500 x 2000
- Standard 4x Digital-Zoom in 3 Stufen
- Flexible Ausbaustufen von Einzelprüfungen bis zum vollautomatischen Prüfablauf
- Datenexport in txt, Word, Excel, PDF
- Hierarchisch strukturierte Benutzerverwaltung
- Individuelles Druckprotokoll
- Netzwerkfähig
- Automatische Lastumstellung

Optionen:

- Großer automatischer Kreuztisch Verfahrweg 300x160 mm
- Drehbarer Eindruck zur Prüfung von dünnen Beschichtungen mit dem Verfahren nach Knoop
- Optionales 7x optische Zoom in 10 Stufen
- Für jeden Prüfablauf die passende Übersichtskamera


Mapping

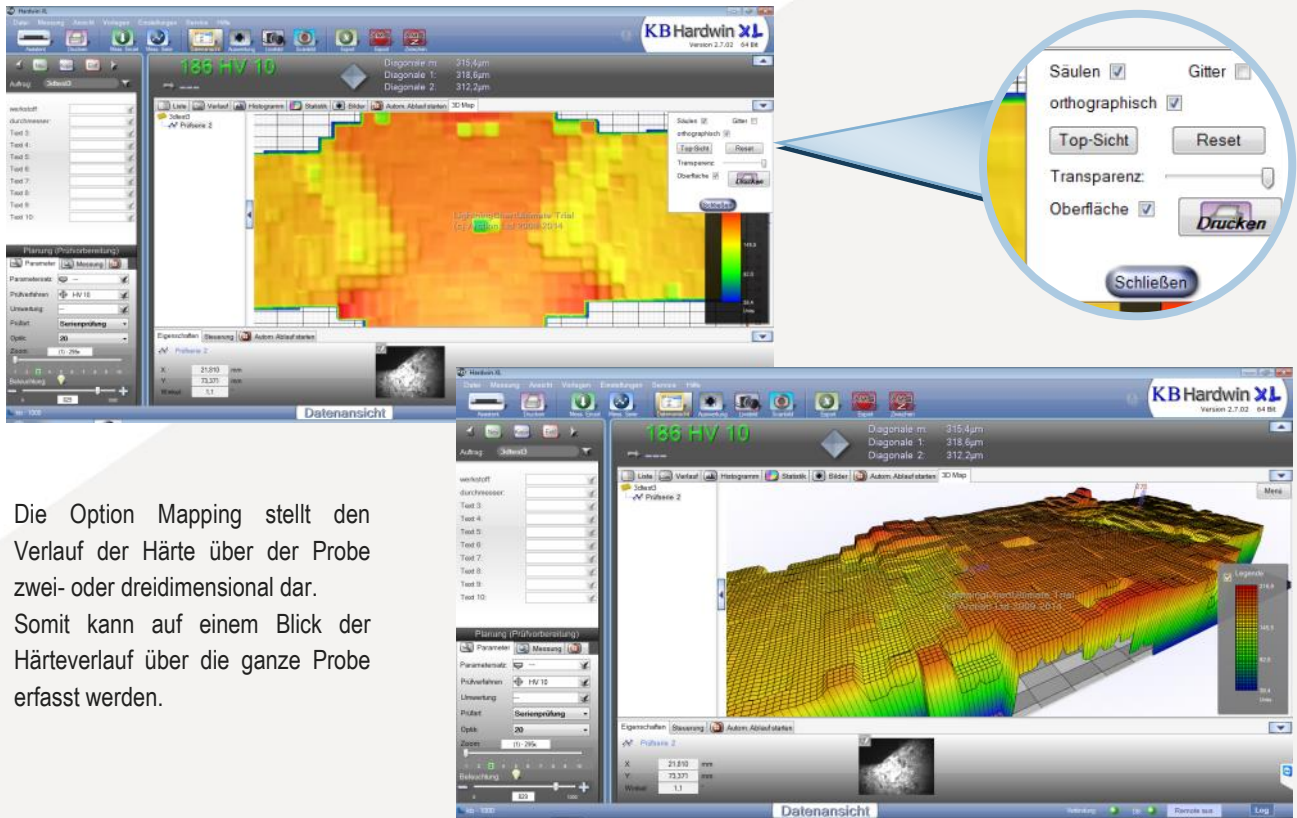

Scanning mit KB Hardwin XL und dem KB Kreuztisch


Konturenskan mit der Mikroskop-Kamera:

Nur der Rand der Probe wird mit der Mikroskop-Kamera abgefahren. Die einzelnen Bilder werden zusammengesetzt.

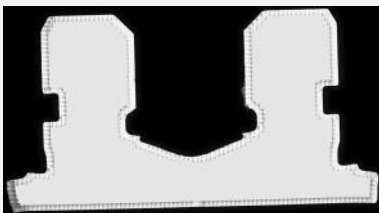


Flächenscan mit der Mikroskop-Kamera:

Die gesamte Probe wird über eine frei definierbare Fläche abfotografiert. Die einzelnen Bilder werden zusammengesetzt.

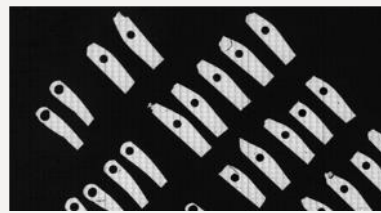

Flächenscan mit der Übersichtskamera:

Die gesamte Probe wird über eine frei definierbare Fläche mit der Übersichtskamera (2. Kamera) abfotografiert. Die einzelnen Bilder werden zusammengesetzt.

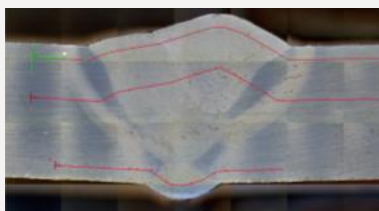

Übersichtskamera:

Eine zweite Kamera sorgt für einen perfekten Überblick. Da mit der Übersichtskamera gescannt werden kann ist die Bildgröße frei wählbar.



Planung und Bedienung

Menü- Führung

- Perfekter Prüfablauf durch übersichtliche und benutzerorientierte Menüführung
- Vergrößerungen können komfortabel eingestellt werden



USB Kamera 5 Megapixel

Die 5MP USB Kamera ermöglicht die Bildqualität, die für die automatische Auswertung notwendig ist. **Sie erweitert den optischen Messbereich**, da mehr Bildinformationen vorliegen.



Unterschiedliche Probenhöhe (für Halb- und Vollautomat)

Proben mit unterschiedlichen Höhen können vollautomatisch geprüft werden. Sie müssen aufsteigend in X-Richtung positioniert werden.



Laststufenwechsel im Prüfauftrag

Innerhalb eines Prüfauftrags kann mit unterschiedlichen Laststufen und Vergrößerungen geprüft werden.

Histogramm Statistik Autom. Ablauf starten				
	Nr.	Härte	Methode	Umgewertet
Messwerte	1	450	HV 5	---
	2	450	HV 5	---
	3	457	HV 5	---
	4	842	HV 1	---
	5	717	HV 1	---

Betriebssystem

Hardwin XL unterstützt die Betriebssysteme Windows XP, Vista (32bit), 7 (32/64 bit) und 10. Die Verwendung eines PCs macht die KB Härteprüfer netzwerkfähig.



Umwertetabellen

Umwertetabellen nach DIN EN ISO 18265 (ohne Kupferumwertung), DIN 50150 und ASTM-140-T1 bis ASTM-140-T9-2007 sind grundsätzlich enthalten

HB	Nmm ²
HRC	Nmm ²
HV	Nmm ²

Nachbearbeitung und Archiv

Nr.	Härte	Methode	Umgewertet	Optik/Zoom
1	463	HV 0,05	---	80x
2	269	HV 0,05	---	80x
3	876			
4	404			

Ersatz messen

Drei Alternativen ermöglichen es, einen gesetzten Eindruck nachzumessen. Das eingefrorene Bild kann geöffnet und nachgemessen werden. Oder der Härteprüfer wechselt in das Live Bild und erstellt ein neues Bild. Es kann auch ein neuer Eindruck gesetzt werden. Der alte Wert wird durch den neuen ersetzt.

Histogramm Statistik Autom. Ablauf starten				
	Nr.	Härte	Methode	Umgewertet
Messwerte	1	624	HV 1	---
	2	571	HV 1	---
	3	536	HV 1	---
	4	502	HV 1	---
	5	520	HV 1	---


Schneller Zugriff auf archivierte Prüfaufträge

Bilder, die zu einem vergangenen Prüfauftrag gehören, sind mit einem Klick wieder aufrufbar

Auswertung

Bedienerunabhängige manuelle Auswertung

Durch die **Pixel-genaue Darstellung** des Eindrucks und die **farbigen Messmarken** wird der Eindruck von **jedem Bediener gleich ausgewertet**.

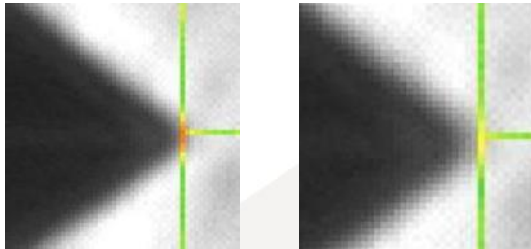


Rot: zu hart


Gelb: ok

Automatische Lichtregelung

Hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit durch eine automatische Lichtregelung, da ohne Bediener-einfluss die optimale Ausleuchtung erzielt wird. Dies kommt besonders bei der automatischen Auswertung zum tragen, wenn sich die Prüflingsoberfläche oder die Vergrößerung ändern.

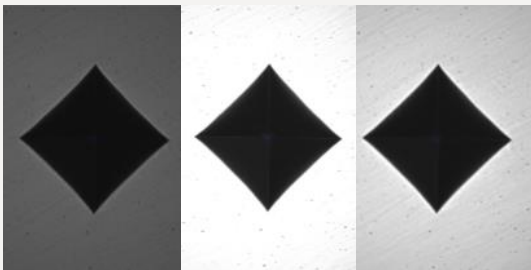

Die **verbesserte automatische Auswertung** misst jetzt noch genauer, auch unter schlechten Oberflächenbedingungen. KB Hardwin XL ist führend auf dem Gebiet der automatischen Auswertung.

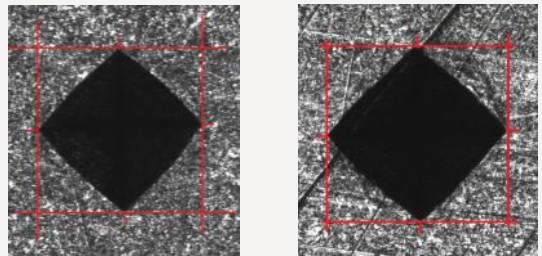


Geätzte Oberfläche

Verkratzte Oberfläche

Einzigtiger Autofokus

Der Autofokus stellt **jede Probe zuverlässig, schnell und präzise scharf**. Die korrekte Position muss nicht erst manuell angefahren werden.

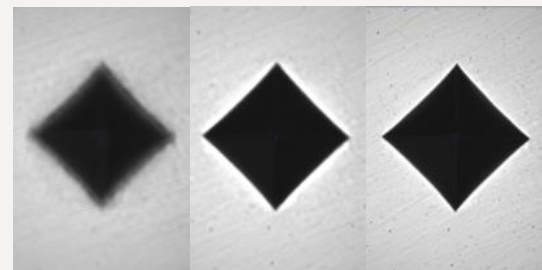

Schweißnahtprüfung


Diagramm mit Angabe der Zonen

Die zuvor definierten Zonen werden in dem Diagramm der Datenauswertung angezeigt.



Tools

Mit Hilfe des Konturen-Tools, des Kreis-Tools und des Splitter-Tools kann jede Schweißnahtprobe mit individuellem Prüfmuster bearbeitet werden.

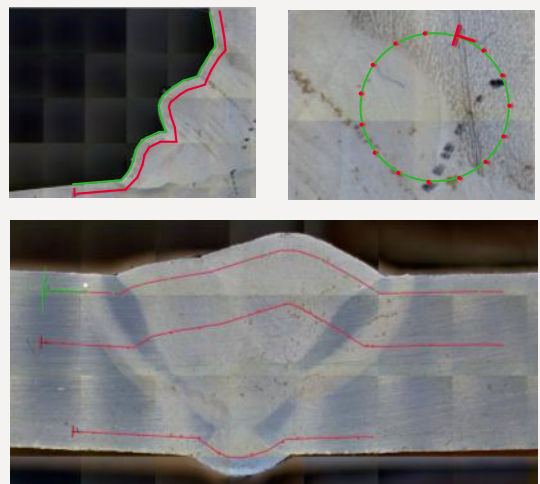


Probenerkennung Reco Jet

- Die richtige Position wird nach dem Scan erkannt und eingedreht
- Position und Winkel werden exakt erfasst
- Das Prüfmuster wird genau appliziert
- Beträchtliche Zeitersparnis bei Prüfung ähnlicher Proben, da das Verlaufsmuster nur einmal erstellt werden muss




Sinterprüfung

- Mittelwertkurve wird unterstützt
- Automatisches Eliminieren von Min/Max Werten
- Interaktives Eliminieren von ungünstig gesetzten Eindrücken
- Positionen der Eindrücke vor dem Setzen interaktiv Anfahren und korrigieren
- Visualisierung der geschätzten Eindruckgröße und des Abstandes zum Nachbareindruck (gelber Rahmen im Bild)

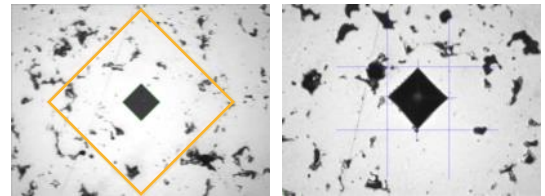


Magazin

Um mehrere Proben einer Art zu prüfen, können kundenspezifische Magazinvorlagen programmiert werden.

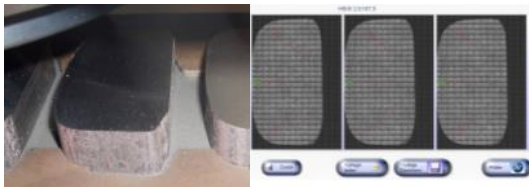

Quicklink

Alle Testreihe einer Probe werden mit nur einem Klick festgelegt. Als Orientierungshilfe dienen Symmetriepunkte, Referenzpunkte, Bezugspunkte und Drehpunkte.

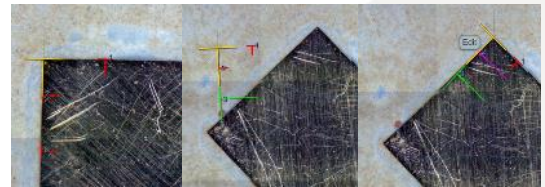

Mehrfachprobenhalter


Mit der Option Mehrfachprobenhalter können schnell, einfach und effektiv mehrere Proben auf einer Tischbelegung automatisch geprüft werden.



Verlaufsprüfung

Verläufe können in der Video-Variante manuell gemessen werden (Option). Der Halb- oder Vollautomat ist inklusive der automatische Verlaufsprüfung.

Zeitersparnis: Es kann eingestellt werden, dass der Verlauf nach Erreichen der Grenzhärte abgebrochen wird bzw. nur noch eine definierte Anzahl an Prüfpunkten gesetzt werden. Diese Einstellung ist unabhängig vom vorangegangenen Prüfablauf.

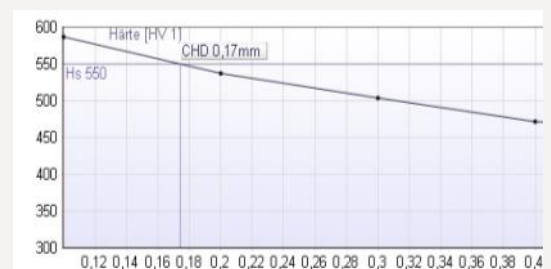



Prüfprotokoll

Test Report

Demo - Protocol

KB Prüftechnik
Werkstoffprüfmaschinen

Name: 123
 Testmethode: HV 10 Werkstoff: XY-A344
 Kunde: Meyer AG Zeichnungs-Nr: A4-B5
 Auftrags-Nr: 123-456-789 Prüfmittel-Nr: PM10-a
 Lieferant: Schmitt Prüfer: Anna Musterfrau

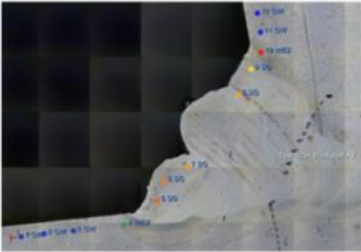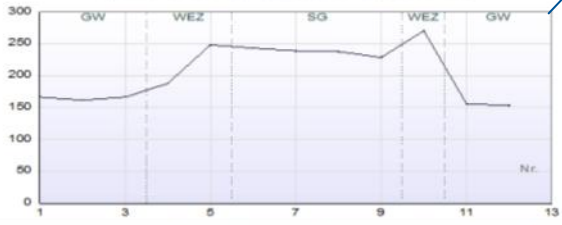Nr.	Härte	Position	Nr.	Härte	Position	Nr.	Härte	Position
1	123							
1.	166	0.89	2.	162	2.81	3.	166	5.24
4.	188	9.46	5.	248	12.4	6.	243	13.13
7.	239	15.18	8.	238	20.01	9.	229	21.27
10.	270	22.25	11.	156	22.37	12.	153	22.29

Signature: *Anna Musterfrau* Seite 1 von 1

Firmeneigene Logos können eingebunden werden.

Anzahl und Inhalt der Eigenschaften sind frei wählbar.

Die Auswahl der Bilder ist vom jeweiligen Protokoll abhängig. Es kann, wenn nötig, auch jeder Eindruck mit Messmarken angezeigt werden.

Das Diagramm bzw. der Verlauf können in das Druckprotokoll integriert werden.

Die Druckprotokolle sind mit dem Protokollgenerator frei gestaltbar.

KB Prüftechnik liefert mit der Software die gängigen Standard-Druckprotokolle aus. Bei abweichenden Anforderungen wird ein spezielles Druckprotokoll erstellt.

Der Protokollgenerator ist in jedem Software-Paket integriert. Somit kann jeder Benutzer eigene, individuelle Protokolle anfertigen, wenn er möchte.



Als Format für die Speicherung des Protokolls kann zwischen PDF, Excel, RTF, JPEG, PNG, EMF, TTY, CSV XML etc. gewählt werden.

Messwerte / Results

KB Prüftechnik
Werkstoffprüfmaschinen

Name: Test 123
 Testmethode: HV 1 Bediener: Hr. Müller
 Auftrags-Nr.: A358-C5 Schicht: N4
 Material-Nr.: M834-2X
 Begleit-Nr.: 62435-24573

Verfahren: CHD
 Grenzhärte: 550
 Kernhärte: 0.00

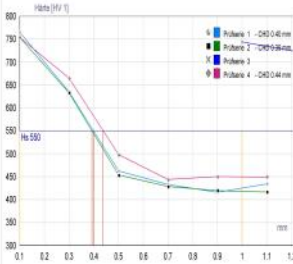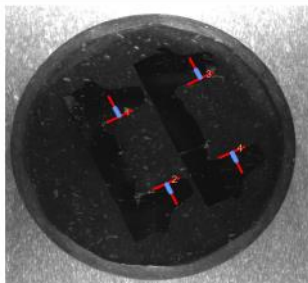Nummer	Härte	Randabstand
1. Prüfsérie 1 KH: 0.00 CHD: 0.40 mm		
1	765 HV 1	0.1 mm
2	635 HV 1	0.3 mm
3	462 HV 1	0.5 mm
4	433 HV 1	0.7 mm
5	416 HV 1	0.9 mm
6	434 HV 1	1.1 mm
2. Prüfsérie 2 KH: 0.00 CHD: 0.39 mm		
1	754 HV 1	0.1 mm
2	633 HV 1	0.3 mm
3	454 HV 1	0.5 mm

Date / Signature Seite 1 von 2

Data Management

Datenexport

Der Datenexport wird als **Textdatei (txt)**, **Word**, **PDF**, **html** oder **Excel** Datei unterstützt. Bearbeitungen in SAP oder Access sind möglich.



Scanner

KB Hardwin XL unterstützt sowohl Barcode– als auch QR Code-Scanner. Somit können Probanden bequem geladen werden.




Automatisiertes Daten-Management



Probe mit Bar– oder QR– Code
im Begleitschein



Code wird gescannt und
gespeicherte Auftragsdaten
und Parametersätze vom ERP-
Server geladen.

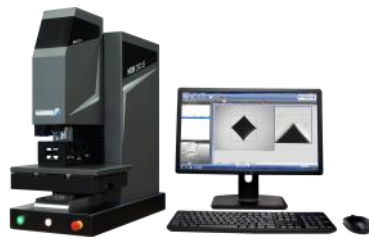

Der Prüfauftrag wird
abgearbeitet .



Die Messergebnisse werden
exportiert und auf dem ERP-
Server gespeichert.



Laststufen (geregelt über einen Kraftaufnehmer)



Vickers nach DIN EN ISO 6507 und ASTM E 384

Laststufe	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	10	20	30	50
Prüflastbereich 10kg																
Prüflastbereich 30kg																
Prüflastbereich 50kg																



Knoop nach DIN EN ISO 4545 und ASTM E 384

Laststufe	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Prüflastbereich 10kg																					
Prüflastbereich 30kg																					
Prüflastbereich 50kg																					




Brinell nach DIN EN ISO 6506 und ASTM E 10

Laststufe	1/ 1	1/ 1,25	1/ 2,5	1/ 5	1/ 10	1/ 30	2/ 4	2/ 5	2/ 10	2/ 20	2,5/ 6,25	2,5/ 7,8125	2,5/ 15,625	2,5/ 31,25	2,5/ 62,5	5/ 25	5/ 62,5
Prüflastbereich 10kg																	
Prüflastbereich 30kg																	
Prüflastbereich 50kg																	


	Standard	Weitere Laststufen auf Anfrage
	Mit Option XS Last	
	Nicht nach Norm	

Kraftregelung, was bedeutet das?

- Kraftregelung ist die **Kraftaufbringung im geschlossenen Regelkreis**:**
Durch das Closed Loop-Verfahren erreicht die KB 30 S - Serie einen hoch genauen Lastereinsatzbereich von **0,005 kg - 62,5 kg** ohne Kraftabweichung
- Höchste Genauigkeit:**
Die KB Härteprüfer bringen die Kraft geregelt auf. Die **kraftgeregelt** Lastaufbringung kann im Vergleich zur **weggeregelten** Lastaufbringung durch ständige Lastüberprüfung genauere Kräfte aufbringen
- Normgerechte und flexible Lastaufbringzeiten:**
Durch den geschlossenen Kraftregelkreis kann die **Lastaufbringzeit individuell** eingestellt werden.
- Vergleich zu Totgewichtssystem:**
Im kraftgeregelt Lastsystem wird, entgegen dem Totgewichtssystem, die **Prüfkraft kontinuierlich gemessen und geregelt**
- Kein Überschwingverhalten:**
Das Überschwingverhalten, das bei dem Kontakt zwischen Eindringkörper und Prüfling zustande kommt, entfällt gänzlich.

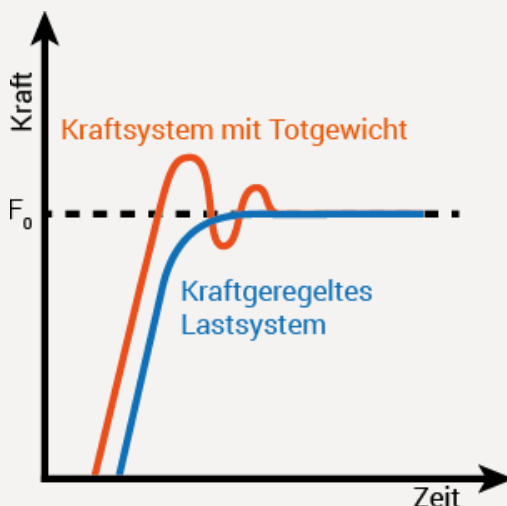


Systematischer Vergleich Totgewicht/
kraftgeregelt Lastsystem

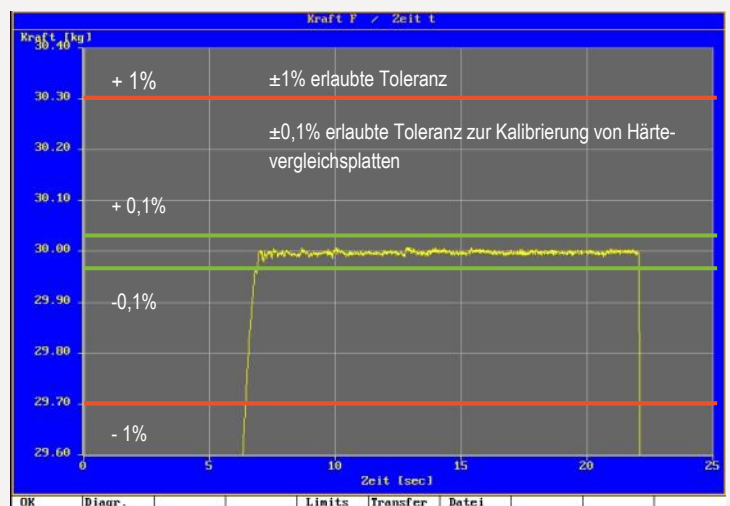

Kraft/ Zeit- Diagramm an einem KB 30 mit Prüflast 30kg

KB optisches Zoom

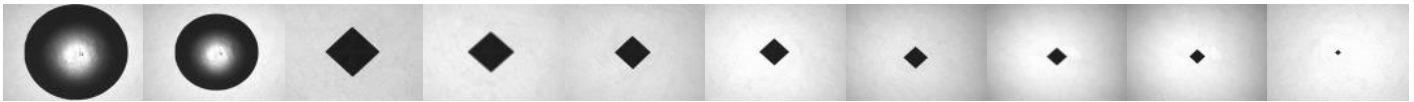

Optische Vergrößerung

Der KB 30 S wird optional mit einem **optischem Zoom** (10 Stufen, 1:7- fache Vergrößerung) ausgestattet. Das Zoom vergrößert optisch, nicht digital. Dies ermöglicht eine einzigartige Bildqualität auch bei großen Vergrößerungen.


Zeit- und Kostenreduzierung

Das KB **optische Zoom** reduziert die Kosten, da es bis zu **4 Objektive** ersetzen kann. Es ist nur ein Objektiv nötig, der **Objektivwechsel entfällt** zum Teil vollständig.

Normgerechtes Prüfen (DIN EN ISO, ASTM)

Durch das KB optische Zoom ist normgerechtes Prüfen auf dem **gesamten Einsatzgebiet** möglich. Der Objektivwechsel entfällt. Das optische Zoom ermöglicht immer eine normgerechte Eindruck-Größe im Videobild.

Schematische Darstellung der Messbereiche der verschiedenen Kameras vom kleinstmöglichen bis zum größtmöglichen Eindruck mit und ohne optisches Zoom

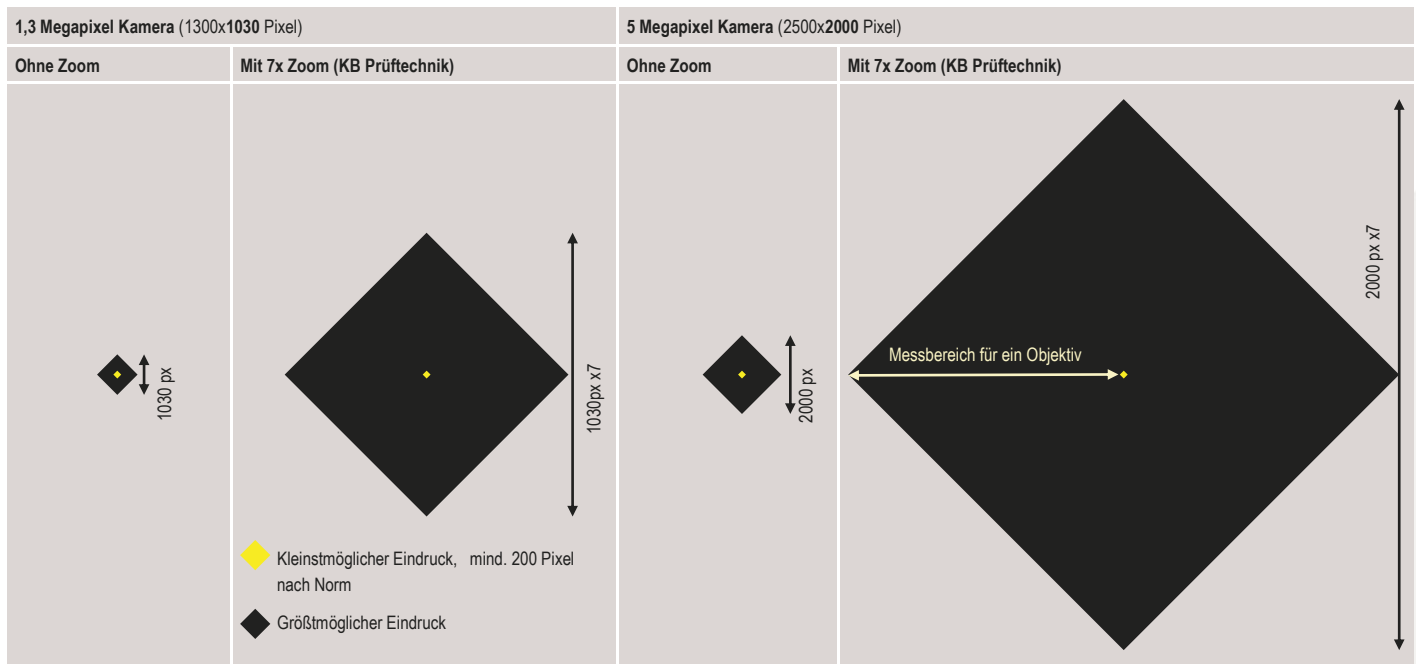

Übersicht optischer Messbereich mit 5 Megapixel Kamera

Laststufe	0,01	0,025	0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	10	20	30	50
Optischer Messbereich mit digitalem Zoom															
10x Objektiv								Auflösung 0,1 µm							
20x Objektiv				Auflösung 0,1 µm											
50x Objektiv	Auflösung 0,02 µm														
100x Objektiv	Auflösung 0,01 µm														
Optischer Messbereich mit optischen Zoom															
4x Objektiv							Auflösung 0,2 µm								
10x Objektiv					Auflösung 0,08µm										
20x Objektiv	Auflösung 0,04µm														
50x Objektiv	Auflösung 0,016 µm														
100x Objektiv	Auflösung 0,008 µm														

Achtung: Ist die Auflösung kleiner 0,2µm, so können auch Diagonaldurchmesser kleiner 40µm gemessen werden.

Technische Daten

Max. Prüflingsgewicht	120kg
Ausladung	170 mm
Prüfraumhöhe ohne Kreuztisch	245 mm
Prüfraumhöhe mit Kreuztisch	170 mm
Lebensdauer LED Beleuchtung	> 10 Jahre
Vergrößerung Zoom	1:7 in 10 Stufen
Auflösung Z-Achse	0,005 µm
Gewicht ohne Kreuztisch	ca. 61kg
Gewicht mit Kreuztisch	ca. 71kg
Kreuztisch Verfahrweg	100x100/ 180x160/ 300x160 mm



Ausstattungsvarianten und Optionen

Legende	
Symbol	Bedeutung
-	Nicht Anwendbar
X	Inklusive
O	Option

	Video	SA	FA Basic	FA
Hardware				
5 Megapixel USB Kamera	X	X	X	X
Prüftisch	Durchmesser 80 mm	Automatischer Kreuztisch	Automatischer Kreuztisch	Automatischer Kreuztisch
Übersichtskamera	-	O + Scanning	O + Scanning	O
Laststufenerweiterung	O	O	O	O
Software				
Automatische Auswertung Nach Vickers und Knoop	O	O	X	X
Multi Sampling	-	O	O	X
Probenerkennung	-	O + Scanning	O + Scanning	X
Scanning	-	O + Autofokus	O	X
Autofokus	O	O	X	X
Manueller Verlauf	O	-	-	-
Grafischer Editor	-	X	X	X
Quick Link	-	O + Scanning	O + Scanning	X
Lichtregelung	O	O	X	X
Schweißnaht	-	O + Scanning	O + Scanning	X
Geometrische Hilfsmittel	-	O + Scanning	O + Scanning	X
Sinter	-	-	O	O
Mehrfachprobenhalter	-	-	O+Scanning +Multisample	O
AMS Schnittstelle	O	O	O	O

KB Prüftechnik GmbH und Prüftechnik Buchmann GmbH & Co. KG

KB Prüftechnik wurde 1997 von zwei ehemaligen Entwicklungsingenieuren von Wolpert Prüfmaschinen gegründet. Zunächst legte man den Fokus auf Modernisierung, entschied sich dann, das aufgebaute Know-How zur Entwicklung von kraftgeregelten, vollautomatischen Härteprüfgeräten zu legen. Heute ist KB Prüftechnik weltweit für innovative und robuste Härteprüfgeräte bekannt.

Prüftechnik Buchmann, seit 1989 bekannt als Partner für Kalibrierung und Vertrieb von Gebrauchtgeräten, befindet sich seit 2008 in einer starken Partnerschaft zu KB Prüftechnik. Wir sind als kleines Mittelstandsunternehmen der stärkste Vertriebs- und Servicepartner in Deutschland und angrenzenden Ländern. Diese enge Partnerschaft drückt sich u.a. jährlich auf dem gemeinsam betreuten Messestand auf der Control in Stuttgart aus. In folgenden Bereichen kooperieren beide Unternehmen, um eine Win-Win Situation zu schaffen:

- **Vertrieb:** Gemeinsam möchten wir den größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden schaffen, daher ist eine Feedbackkultur mit intensivem Austausch beider Partner gewachsen.
- **Service:** Ein Großteil unserer Kapazitäten sind auf den Service für KB von KB Kunden gebündelt. Unser Personal wird regelmäßig geschult um alle Serviceanfragen, die KB Maschinen betreffend, bearbeiten zu können. Wir haben ein eigenes Außenlager für die gängigsten Ersatzteile, somit können wir Ihnen eine hervorragende Maschinenverfügbarkeit sichern. KB wiederum kann auf unsere Kapazitäten zurückgreifen.
- **Kalibrierung:** Beide Unternehmen stehen in enger Absprache zu Neuerungen bzgl. der Kalibrierung von Werkstoffprüfmaschinen. Dazu herrscht ein kollegialer Umgang, um aus der Bestpractice des Partners zu lernen. Die Kalibrierlabore stehen dabei nicht in Konkurrenz, wir betrachten sie als aktives Benchmarking, um sich gemeinsam zu verbessern.
- **Support:** Unsere Mitarbeiter können jederzeit auf den Support der KB internen Mitarbeiter vertrauen. Alle Mitarbeiter sind durch das enge, freundschaftliche Verhältnis persönlich miteinander bekannt. Dies spart lange Verbindungswege, da wir direkt auf den richtigen Ansprechpartner zugreifen können. Bislang konnten wir jedes Problem gemeinsam lösen.



Prüftechnik Buchmann GmbH & Co. KG
Bürkhofstr. 25
74545 Michelfeld

Tel: +49-791 – 9781-127
Fax: +49-791 – 9781-131

Email: info@prueftechnik-buchmann.de
Internet: www.prueftechnik-buchmann.de